

MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA · CONTROL DUAL · DESLIZAMIENTO 340 MM · COMPATIBLE C-ARM

PCB-ET300




ACERCA DEL PCB-ET300

Diseñada para todas las especialidades quirúrgicas.

La **PCB-ET300** es una mesa de operaciones electrohidráulica diseñada con **sistema de doble control** — eléctrico y manual hidráulico — para operación confiable en cualquier quirófano. Platos modulares **EASY CLICK**, ajustes de cabezal y piernas con resorte de gas, y **340 mm de deslizamiento horizontal** la hacen compatible con imagen C-arm, tracción ortopédica y procedimientos de hombro.

RANGO VERTICAL

Elevación de 600 a 930 mm.

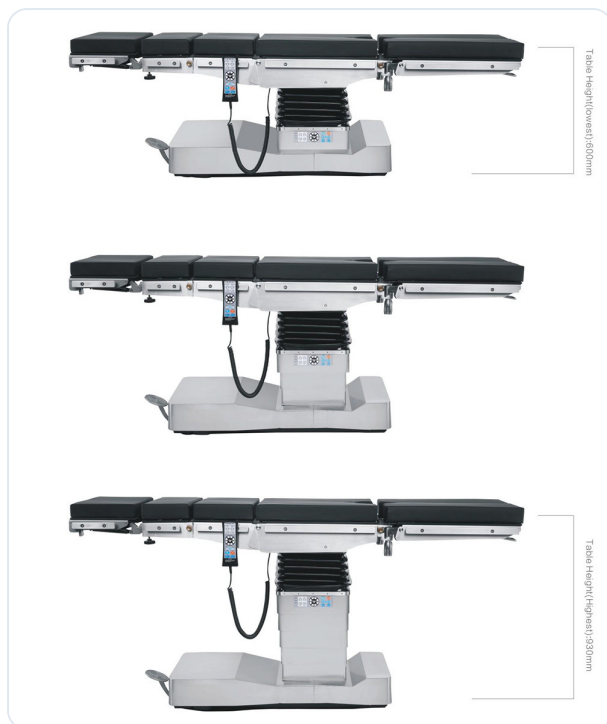

Un **recorrido de elevación de 330 mm** desde la altura más baja de transferencia del paciente hasta la altura de trabajo del cirujano — cubriendo todos los tipos de cuerpo y procedimientos ergonómicamente.

- Altura mínima del tablero: **≤ 600 mm** (750 mm opcional)
- Altura máxima del tablero: **930 mm**
- Elevación electrohidráulica suave, mantiene posición bajo carga total

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE

De supino a silla de playa, con fluidez.

Los platos articulados de cabezal, espalda y piernas se mueven independientemente para posicionar al paciente en **cirugía de hombro, abdominal, ginecológica, urológica, ortopédica y neurocirugía**.

- Plato de espalda: **80° arriba / 40° abajo**
- Plato de cabezal: **50° arriba / 60° abajo** (asistido por resorte de gas)
- Plato de piernas: **20° arriba / 90° abajo** · **apertura 90°**
- Trendelenburg / Trendelenburg invertido: **30° / 30°**
- Inclinación lateral: **25° izquierda / derecha**



COMPATIBILIDAD C-ARM

340 mm de deslizamiento horizontal para imagen.



El desplazamiento horizontal motorizado mueve al paciente respecto a la columna para que **el C-arm pueda escanear de cabeza a pies sin reposicionar**. Crítico para casos vasculares, ortopédicos y de trauma.

- 340 mm de recorrido longitudinal
- Compatible con **sistemas móviles C-arm y de rayos X**
- **Sección radiotransparente** del tablero sobre la zona de imagen

DISEÑO MODULAR EASY CLICK

Reconfigura para el próximo caso en segundos.

Los platos de piernas divididos y el plato de espalda se desconectan mediante el **acople EASY CLICK** — sin herramientas, sin esperas. Conecta un accesorio de cirugía de hombro o un marco de tracción ortopédica y estás listo. La **anulación hidráulica manual** queda a la mano si el sistema eléctrico falla.

- **Platos de piernas divididos** con desmontaje de un toque
- Plato de espalda modular acepta **accesorios de cirugía de hombro**
- Compatible con **marcos de tracción ortopédica**
- **Anulación hidráulica manual** — operación de respaldo sin energía
- **Flex, reflex y recuperación a posición cero** con un botón
- **Interruptor de parada de emergencia** (estándar)



DATOS TÉCNICOS

Especificaciones completas.

MODELO

PCB-ET300

LONGITUD TABLERO

2.040 mm

ANCHO TABLERO

550 mm

ALTURA MÍNIMA TABLERO

≤ 600 mm (750 mm opc.)

ALTURA MÁXIMA TABLERO

930 mm

RANGO DE ELEVACIÓN

330 mm

TRENDELENBURG

30°

TRENDELENBURG INVERTIDO

30°

INCLINACIÓN LATERAL

25° izq. / der.

CABEZAL ARRIBA / ABAJO

50° / 60°

ESPALDA ARRIBA / ABAJO

80° / 40°

PIERNAS ARRIBA / ABAJO

20° / 90°

APERTURA PIERNAS

90°

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

340 mm

SISTEMA DE CONTROL

**Electrohidráulico + manual
hidráulico**

ANULACIÓN MANUAL

Estándar

PARADA DE EMERGENCIA

Estándar

ACCESORIO DE HOMBRO

Opcional

PUENTE RENAL EXTERNO

Opcional

CERTIFICACIONES

CE · ISO 9001 · ISO 13485