

MESA CIRÚRGICA ELETRO-HIDRÁULICA · CONTROLE DUPLO · DESLIZAMENTO 340 MM · COMPATÍVEL C-ARM

PCB-ET300




SOBRE O PCB-ET300

Projetada para todas as especialidades cirúrgicas.

A **PCB-ET300** é uma mesa de operações eletro-hidráulica projetada com **sistema de controle duplo** — elétrico e manual hidráulico — para operação confiável em qualquer centro cirúrgico. Pratos modulares **EASY CLICK**, ajustes de cabeceira e pernas com mola a gás, e **340 mm de deslizamento horizontal** a tornam compatível com imagem C-arm, tração ortopédica e procedimentos de ombro.

FAIXA VERTICAL

Elevação de 600 a 930 mm.

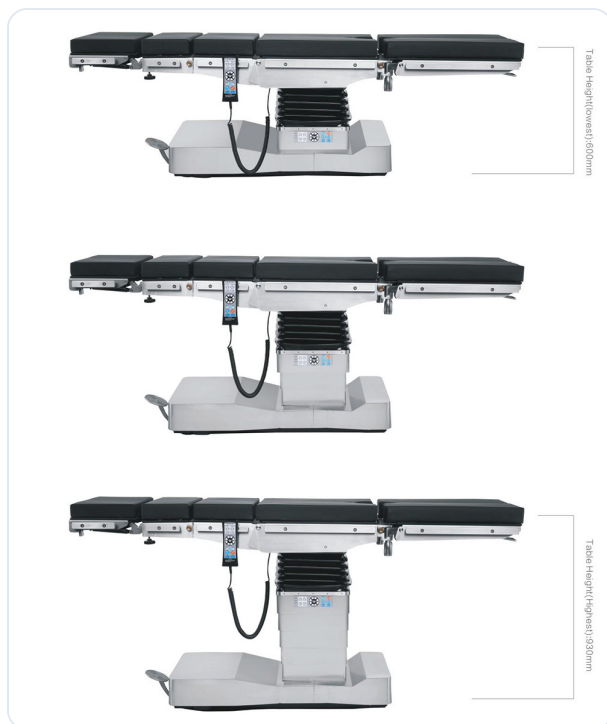

Um **curso de elevação de 330 mm** desde a altura mínima de transferência do paciente até a altura de trabalho do cirurgião — cobrindo todos os tipos de corpo e procedimentos ergonomicamente.

- Altura mínima do tampo: **≤ 600 mm** (750 mm opcional)
- Altura máxima do tampo: **930 mm**
- Elevação eletro-hidráulica suave, mantém posição sob carga total

POSICIONAMENTO DO PACIENTE

De supino a **cadeira de praia**, fluidamente.

Os pratos articulados de cabeça, dorso e pernas movem-se independentemente para posicionar o paciente em **cirurgia de ombro, abdominal, ginecológica, urológica, ortopédica e neurocirurgia**.

- Prato dorsal: **80° cima / 40° baixo**
- Prato de cabeça: **50° cima / 60° baixo** (assistido por mola a gás)
- Prato de pernas: **20° cima / 90° baixo** • abertura **90°**
- Trendelenburg / Trendelenburg reverso: **30° / 30°**
- Inclinação lateral: **25° esquerda / direita**



COMPATIBILIDADE C-ARM

340 mm de deslizamento horizontal para imagem.



O deslocamento horizontal motorizado move o paciente em relação à coluna para que o **C-arm** possa escanear da cabeça aos pés sem reposicionamento. Crítico para casos vasculares, ortopédicos e de trauma.

- 340 mm de curso longitudinal
- Compatível com **sistemas móveis C-arm e de raios X**
- **Seção radiotransparente** do tampo sobre a zona de imagem

DESIGN MODULAR EASY CLICK

Reconfigure para o próximo caso em segundos.

Os pratos de pernas divididos e o prato dorsal desconectam-se através do **encaixe EASY CLICK** — sem ferramentas, sem esperas.

Conecte um acessório de cirurgia de ombro ou um quadro de tração ortopédica e está pronto.

O **override hidráulico manual** fica à mão caso o sistema elétrico falhe.

- **Pratos de pernas divididos** com remoção de um toque
- Prato dorsal modular aceita **acessórios de cirurgia de ombro**
- Compatível com **quadros de tração ortopédica**
- **Override hidráulico manual** — operação de backup sem energia
- **Flex, reflex e recuperação à posição zero** com um botão
- **Botão de parada de emergência** (padrão)



DADOS TÉCNICOS

Especificações completas.

MODELO
PCB-ET300

COMPRIMENTO TAMPO
2.040 mm

LARGURA TAMPO
550 mm

ALTURA MÍNIMA TAMPO
≤ 600 mm (750 mm opc.)

ALTURA MÁXIMA TAMPO
930 mm

FAIXA DE ELEVAÇÃO
330 mm

TRENDELENBURG
30°

TRENDELENBURG REVERSO
30°

INCLINAÇÃO LATERAL
25° esq. / dir.

CABECEIRA CIMA / BAIXO
50° / 60°

DORSO CIMA / BAIXO
80° / 40°

PERNAS CIMA / BAIXO
20° / 90°

ABERTURA PERNAS
90°

DESLIZAMENTO HORIZONTAL
340 mm

SISTEMA DE CONTROLE
**Eletro-hidráulico + manual
hidráulico**

OVERRIDE MANUAL
Padrão

PARADA DE EMERGÊNCIA
Padrão

ACESSÓRIO DE OMBRO
Opcional

PONTE RENAL EXTERNA
Opcional

CERTIFICAÇÕES
CE · ISO 9001 · ISO 13485