

ULTRASSOM DIGITAL P/B · PORTÁTIL · LCD 12" 75° · 2 CONECTORES · BATERIA LI · CE / ISO 13485

PCB-VIEW-05



SOBRE O PCB-VIEW-05

Qualidade de imagem hospitalar em formato portátil.

O **PCB-VIEW-05 Ultrassom Digital P/B** leva qualidade de imagem hospitalar para atenção primária, ambulatório, centros de cirurgia ambulatorial e uso à beira do leito. Construído sobre tecnologia exclusiva de imagem dupla onda e entregue com **transdutor convex 3C50A**, **bateria de lítio interna** e suíte completa de I/O (USB, Vídeo, VGA, Equipotencial, Impressora), está pronto para campo desde a embalagem.

Um **monitor LCD de alta definição 12"** com ângulo ajustável até 75° sobre teclado retroiluminado e botão all-round entrega operação eficiente, rápida e ergonômica. Modos: **B, 2B/4B, M, B/M e PW Doppler** com espectro tela cheia, guia de biópsia, módulos OB e PW inclusos, e pacote completo de medição (Geral, OB&GIN, Cardíaco).

Pesando apenas **6.2 kg**, com **armazenamento de dados raw** para relatórios offline e **reset automático de parâmetros em um clique**, o PCB-VIEW-05 é verdadeiramente portátil e escala de clínicas individuais a hospitais universitários. Inclui **garantia de 2 anos** a partir da data ex-fábrica.

ESPECIFICAÇÕES

Construído para diagnóstico por imagem portátil.

MODELO

PCB-VIEW-05

TIPO

Ultrassom Digital P/B · Portátil

TECNOLOGIA IMAGEM

Dupla onda exclusiva

TELA

**LCD HD 12" · ângulo ajustável
75°**

PESO

6.2 kg (leve)

CONECTORES

**2 conectores ativados + 2
suportes**

TRANSDUTOR PADRÃO

3C50A Convex (incluso)

MODOS

**B · 2B/4B · M · B/M · PW (Doppler
com espectro)**

REALCE DE IMAGEM

THI · TSI

MÓDULOS INCLUSOS

Módulo OB + Módulo PW

FUNÇÕES AUTO

**Reset parâmetros um-clique ·
Auto-congelamento**

BIÓPSIA

Função de biópsia suportada

AMPLIAÇÃO

Ampliação + tela cheia

MEDIÇÃO

Geral · OB&GIN · Cardíaco

ESPECTRO

PW espectro tela cheia

CONTROLES

**Teclado retroiluminado · botão
all-round**

INTERFACES

**2 USB · Vídeo · VGA ·
Equipotencial · Impressora**

ARMAZENAMENTO

**Raw data para relatórios +
ajustes offline**

RELATÓRIOS

**Auto-geração BMP · USB
import/export**

LEITURA EM PC

Não requer software especial

BATERIA

Bateria interna de Lítio (padrão)

GARANTIA

2 anos a partir da data ex-fábrica

CERTIFICAÇÕES

CE · ISO 13485

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Projetado para confiança diagnóstica diária.

IMAGEM DUPLA ONDA

Tecnologia exclusiva de imagem dupla onda entrega resolução B-mode consistente. THI e TSI refinam detalhe de tecido e sensibilidade Doppler para abdome, vascular, GO, urologia, cardíaco, partes pequenas e MSK.

PW DOPPLER COM ESPECTRO TELA CHEIA

Doppler de onda pulsada com espectro em tela cheia para fluxo vascular e cardíaco. **Módulos OB e PW inclusos** com a unidade padrão — pronto para exames OB de rotina desde o dia um.

6.2 KG · BATERIA PRONTA DE FÁBRICA

Com apenas 6.2 kg e **bateria de lítio interna como equipamento padrão**, o PCB-VIEW-05 se move entre salas, andares e campanhas — sem compra adicional de bateria.

RAW DATA + RESET UM-CLIQUE

Armazenamento de dados raw permite ajustar parâmetros e regenerar relatórios offline após o exame. **Reset automático em um clique** retorna a unidade à linha base entre pacientes — fluxo mais rápido e consistente.

TRANSDUTORES

Configure o conjunto de sondas para sua prática.

3C50A CONVEX (PADRÃO)

Transdutor convex de uso geral incluso com cada PCB-VIEW-05. Cobre abdome, OB, ginecologia, urologia e escaneamento geral.

7L40A LINEAR (OPCIONAL)

Transdutor linear para vascular (carótida, periférico), partes pequenas (tireoide, mama, testículos), MSK e estruturas superficiais.

6E10A TRANSVAGINAL (OPCIONAL)

Transdutor endocavitário para exames transvaginais GO — avaliação de gravidez precoce, ginecologia, monitoramento folicular em FIV.

6C15A MICROCONVEX (OPCIONAL)

Transdutor microconvex para abdome pediátrico/neonatal, cardíaco e superficial onde se requer pegada pequena.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Configure o fluxo que você precisa.



CARRINHO PERSONALIZADO

Carrinho móvel mantém o scanner em altura ergonômica e guarda gel, transdutores e acessórios.

BOLSA DE TRANSPORTE

Bolsa acolchoada para campanhas, visitas domiciliares e transporte entre unidades. Protege a unidade e todos os acessórios padrão durante o trânsito.


IMPRESSORA DE VÍDEO (SONY-UP-X898MD)

Impressora térmica de alta resolução para impressão imediata de capturas clínicas B-mode e Doppler.

IMPRESSORA LASER P/B (HP-1108)


Impressora laser para relatórios de exame P/B de página completa gerados pelo software do PCB-VIEW-05.

Escaneamentos em diferentes especialidades.

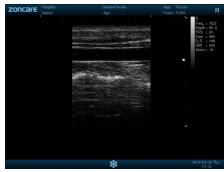


CARÓTIDA (CCA) · PW DOPPLER

Espectro Doppler pulsado da carótida comum — capacidade vascular com transdutor linear (7L40A).

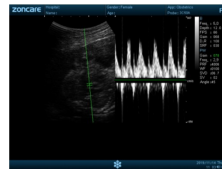


VEIA PORTAL · PW

Fluxo portal com traço PW — avaliação hepática e vascular abdominal com o convex padrão 3C50A.

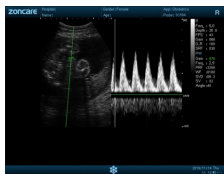

VASOS PALMARES · PW

Vasos superficiais palmares com PW Doppler — uso em partes pequenas e MSK (transdutor linear).

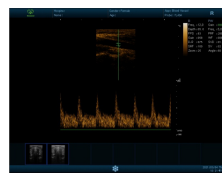

FÍGADO-RIM · B-MODE

Quadrante superior direito B-mode da interface fígado-rim — vista clássica com o convex padrão.